


WINTERGREEN

Methyl salicylate, 100

Wintergreen

TIC

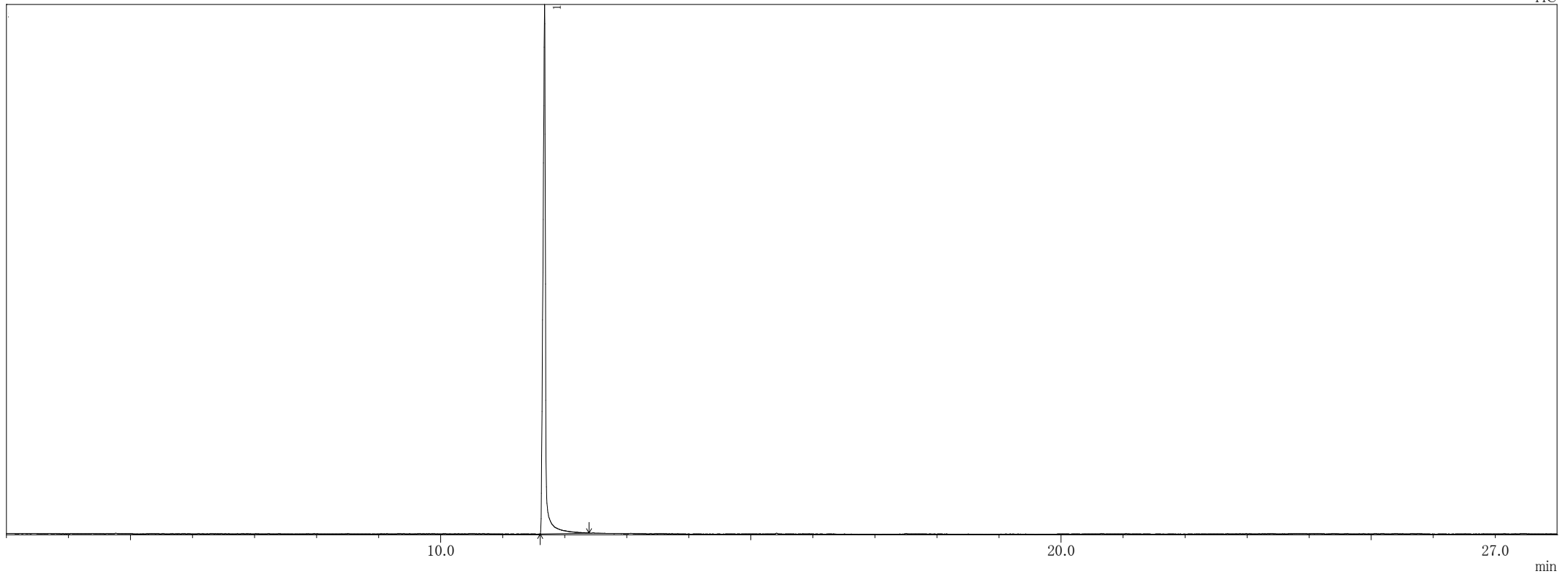

ピークテーブル TIC

ピーク#	保持時間	面積	面積%	高さ	高さ%	A/H	化合物
1	11.676	16842860	100.00	5867163	100.00	2.87	Methyl salicylate
		16842860	100.00	5867163	100.00		

※1 設備提供：株式会社 久留米リサーチ・パーク

※2 使用機器：島津製作所製 GC-MS：QP2010 Plus

※3 分析条件：サンプルは有機溶媒で500倍に希釈後、直接導入法にて分析。

サンプル前処理…アセトンで500倍希釈、カラム…DB-5ms、

昇温条件…40℃(2min)-10℃/min-240℃(5min)、NISTライブラリにて同定。